

Für die Anwendung in Klinik und Praxis:  
**Accu-Chek Safe-T-Pro Uno**  
und **Accu-Chek Safe-T-Pro Plus**



**Accu-Chek Safe-T-Pro Uno**  
200 Stück  
Materialnummer 05888662150  
PZN 06143663



**Accu-Chek Safe-T-Pro Plus**  
200 Stück  
Materialnummer 03603539150  
PZN 01754184

**Sie wollen mehr erfahren?**

Unsere Mitarbeiter im Accu-Chek Kunden Service Center sind für Sie da!  
Kostenfreie Telefonnummer 0800 4466800 (Mo–Fr, 08:00–18:00 Uhr).  
Oder besuchen Sie unser Online-Portal unter [www.accu-chek.de](http://www.accu-chek.de),  
unsere Community [www.mein-buntes-leben.de](http://www.mein-buntes-leben.de) oder unsere Facebookseite auf  
[www.facebook.com/accucheckde](http://www.facebook.com/accucheckde)

ACCU-CHEK und SAFE-T-PRO sind Marken von Roche.

© 2021 Roche Diabetes Care Deutschland.

[accu-chek.de](http://accu-chek.de)  
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH  
Sandhofer Straße 116  
68305 Mannheim

05239567990 © 0321

ACCU-CHEK®



# EINMALSTECHHILFEN SICHER UND HYGIENISCH



## ACCU-CHEK SAFE-T-PRO UNO UND ACCU-CHEK SAFE-T-PRO PLUS

Für die sichere und hygienische Blutgewinnung  
in Klinik und Praxis

Erfüllen die Anforderungen der TRBA 250<sup>1</sup>

## ACCU-CHEK EINMALSTECHHILFEN SICHER UND HYGIENISCH

Die Accu-Chek Einmalstechhilfen ermöglichen eine sichere und hygienische Blutgewinnung:

- Die sterile Lanzette befindet sich geschützt im Gehäuseinneren.
- Ein Sicherheitsmechanismus blockiert die Lanzette nach Gebrauch, so dass eine Mehrfachverwendung ausgeschlossen ist.
- Nach Gebrauch wird die komplette Stechhilfe entsorgt; so besteht keine Verletzungsgefahr.
- Sie erfüllen die Anforderungen der TRBA 250.<sup>1</sup>

### ACCU-CHEK SAFE-T-PRO UNO – Wenn es schnell gehen muss



#### Schnell und praktisch

- Einstichtiefe 1,5 mm für den sofortigen Einsatz
- Nadeldurchmesser 0,36 mm
- Vorteilhaft bei hohem Patientenaufkommen
- Schnell und sicher eine ausreichende Menge Blut gewinnen – für eine zuverlässige Blutzuckermessung

### ACCU-CHEK SAFE-T-PRO PLUS – Für mehr Flexibilität



#### Individuell und flexibel


- 3 wählbare Einstichtiefen (1,3 mm, 1,8 mm und 2,3 mm)
- Nadeldurchmesser 0,63 mm
- Flexibler Einsatz: für unterschiedliche Hautbeschaffenheiten und benötigte Blutmengen geeignet

## EINFACHE BLUTGEWINNUNG IN WENIGEN SCHRITTEN

- Ergonomische T-Form der Stechhilfen erleichtert die intuitiv richtige Verwendung
- Griffige Oberfläche für eine bequeme und sichere Handhabung
- 3-seitiger, hautschonender Lanzettenschliff, geführte Lanzettenbewegung und hohe Lanzettengeschwindigkeit sorgen für sanftes Durchdringen der Haut

**Hinweis:** Nach einmaligem Gebrauch wird die Stechhilfe komplett entsorgt!

### ACCU-CHEK SAFE-T-PRO UNO

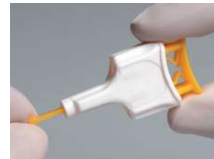

1. Sterilkappe abdrehen



2. Stechhilfe fest auf die Einstichstelle setzen und den Auslöseknopf drücken

### ACCU-CHEK SAFE-T-PRO PLUS



1. Sterilkappe abdrehen



2. Stechtiefe bei Bedarf durch Drehen des Einstellringes ändern



3. Stechhilfe fest auf die Einstichstelle setzen und den Auslöseknopf drücken

<sup>1</sup> TRBA 250 Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege